


USER キー(フロント・パネル)の利用方法

V 1.0

(株)アドバンテスト

1. フロント・パネルの USER キーには、任意のソフト・キー・メニューが設定出来ます

下の写真の例では、Center Frequency, Span, CH Power, OBW, Ref. Level を設定した場合を示しています。いつも良く使うキーや、ソフト・メニューの階層が深いメニューなどを設定致しますと、お客様独自のソフト・メニューが作成できますので、非常に操作性が向上致します。

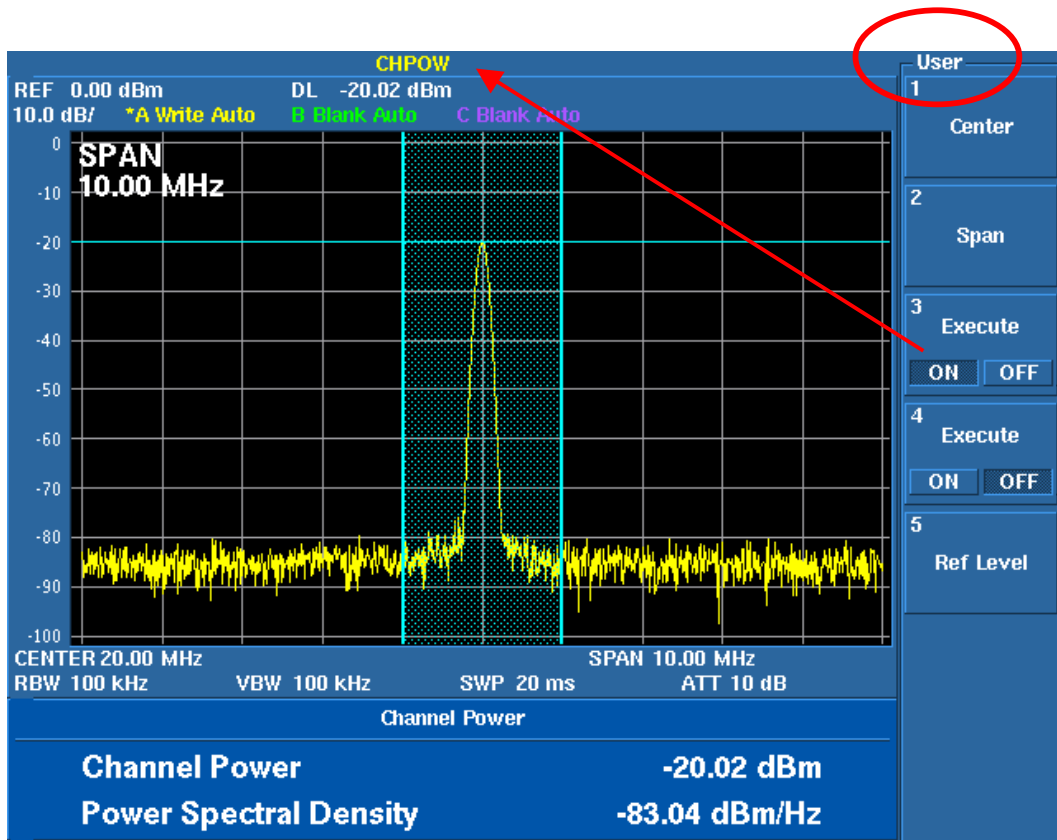


USER キーの機能

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 設定可能なソフト・メニュー： | 7 個まで (上から配置されます)。 |
| 解除方法： | 1 個ずつ削除します。 |
| Save Recall 機能： | 対象外です (電源 OFF では保持されます)。 |
| 測定機能表示： | 画面の上部に表示されます。 |

2. USER キーの設定方法

設定したいソフト・メニューをソフト・メニュー表示エリアに表示させます。

この例では、Centerを設定したいので、FREQUENCY キーを押す。
(すなわち、設定したいソフト・メニューを表示させる)

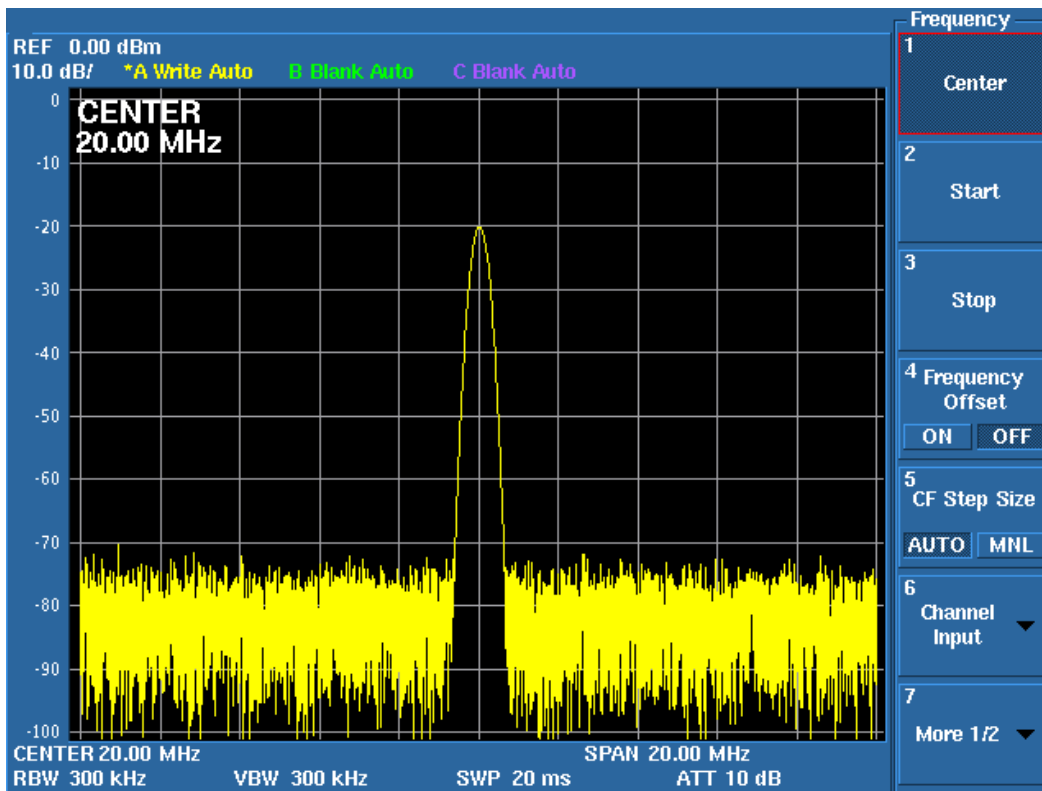


SHIFT **USER** を押します。

設定メッセージが表示されますので、設定したいソフト・キーを押します。
(この場合、Center を押します)

終了メッセージが表示されますので、単位キー (Hz) を押します。
(または、自然に表示が消えるまで待ちます)

Center ソフト・キーが設定された様子を次の写真に示します。

さらに、ソフト・メニューを設定する場合は、
最初 (2 . USER キーの設定方法) に戻り、操作を繰り返します。

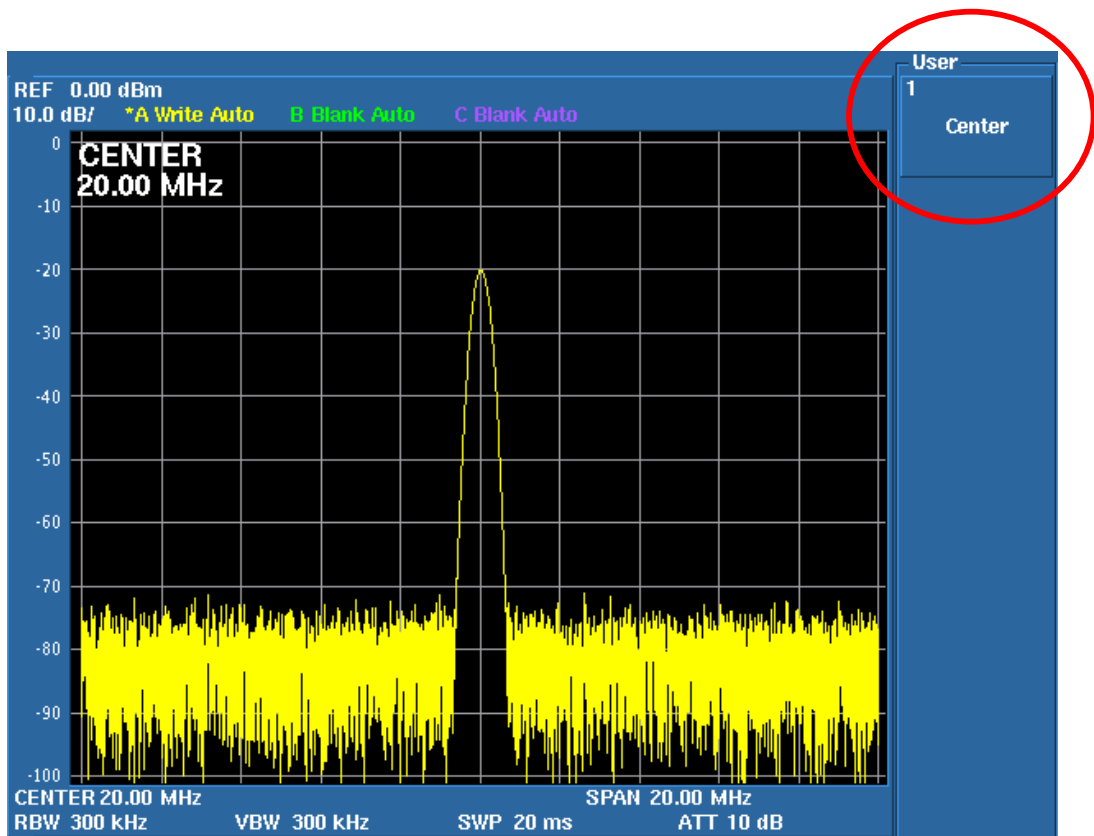

3 . USER キーの解除方法

USER を押します。

SHIFT **USER** を押します。

(USER キーを表示している時、この操作が削除機能となる)

削除メッセージが表示されますので、削除したいソフト・キーを押します。

(ソフト・キー以外を押しますと、この機能はキャンセルとなります)

削除完了メッセージが表示されますので、単位キー (Hz) を押します。

(または、自然に表示が消えるまで待ちます)

さらに、削除したいソフト・キーがある場合は上記を繰り返します。